

Návod k použití



Upozornění

1. Před použitím se ujistěte, že je chodítko plně rozložené.
2. Zkontrolujte, že jsou brzdy a sedák správně zajištěny, zejména sedací část.
3. Před použitím sedáku musí být brzdy zajištěny.
4. Nepoužívejte chodítko k tlačení nebo tažení osoby, aby nedošlo ke zranění.

Údržba

1. Povrch chodítka pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani agresivní chemikálie.
2. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou části uvolněné, opotřebované nebo poškozené. Pokud zjistíte problém, před použitím jej opravte.
3. Pokud chodítko delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na chladném, suchém a bezpečném místě.


Nosnost

Chodítko

Úložná taška



Přitažením nahoru → brzdění

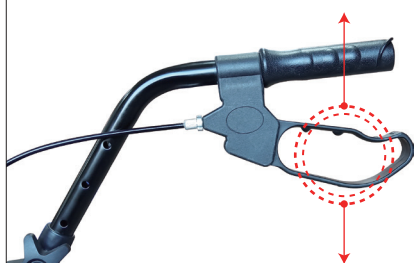

Zatlačením dolů → parkovací brzda



Pokud brzdy nefungují správně, nastavte brzdové lanko podle obrázku.

Seznam dílů



Hlavní rám




Sedák




Opěrka zad



Úložná taška

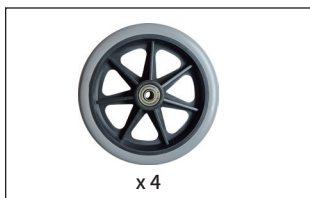

Kolečka
x 4

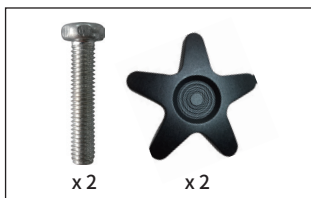

① Šroub/matice
x 2 x 2







② Šroub/spona
x 4 x 2





Montážní nářadí
x 1 x 1

Krok 1 | Namontujte kolečka k hlavnímu rámu a zajistěte je pomocí montážního nářadí.


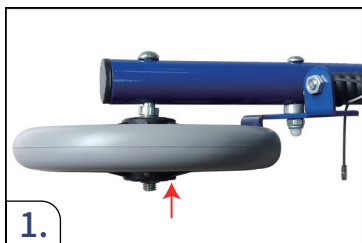


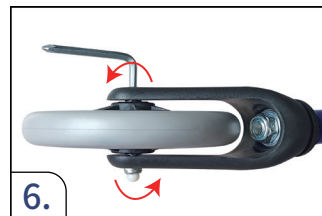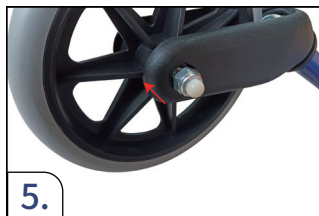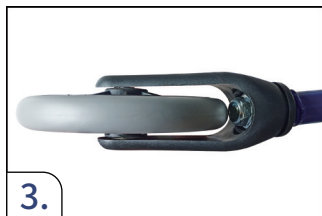


Krok 2 | Rozložte hlavní rám a nastavte madla do stejné výšky. Poté je zajistěte pomocí šroubu a matice ① podle obrázku.

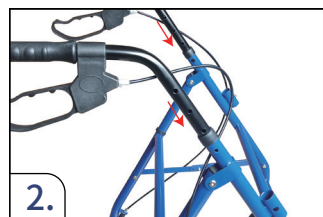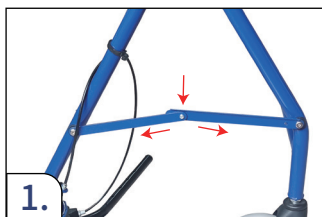

Krok 3 | Připevněte úložnou tašku k hlavnímu rámu podle obrázku.

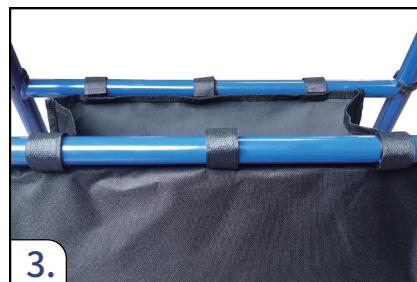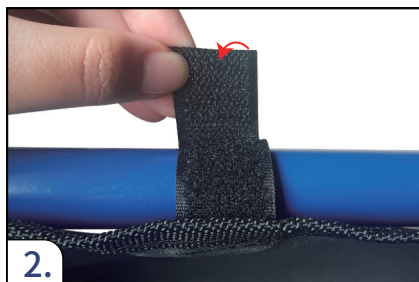

Krok 4 | Namontujte sedák k hlavnímu rámu a pomocí montážního nářadí jej zajistěte šroubem a sponou ② podle obrázku.

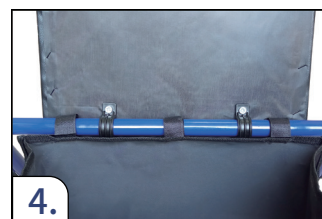

Krok 5 | Namontujte opěrku zad k hlavnímu rámu a zatlačte ji, dokud nezacvakne pojistka.

